



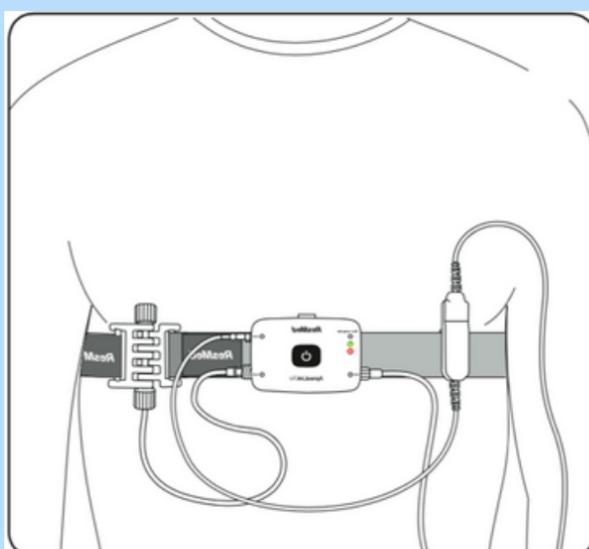

COLOCACIÓN DE POLIGRAFO

Para evitar irritación o incomodidad, colóquese el cinturón y el dispositivo sobre una camiseta con manga o sobre su ropa de dormir.

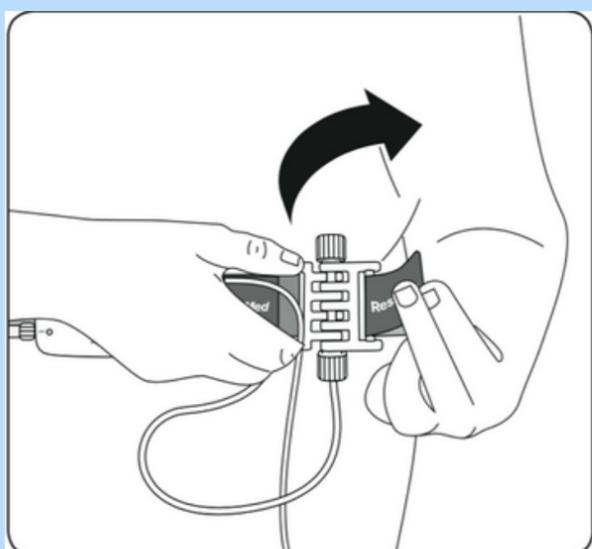

- 1. Pásese el cinturón alrededor del cuerpo. Pase el extremo libre del cinturón por la ranura libre del sensor de esfuerzo y pegue la lengüeta en el cinturón.
- 2. Compruebe que el cinturón le quede firme y cómodo y que el dispositivo esté colocado en el centro del pecho.



Notas:

- **El modo más fácil de colocarse el dispositivo es mirándose de frente al espejo.**
- **Las mujeres deben ponerse el cinturón por encima de los senos.**
- **El cinturón debe quedar firme y cómodo, no flojo, no tan apretado que impida la respiración.**

Colocación de los accesorios

Cánula nasal

Asegúrese de que la cánula esté colocada de la forma que se describe.

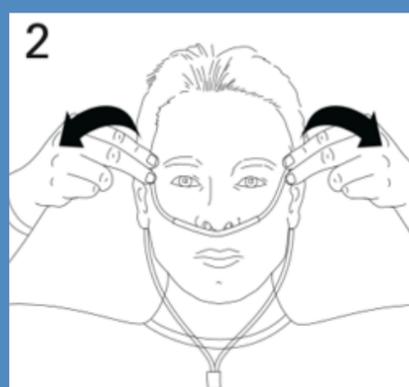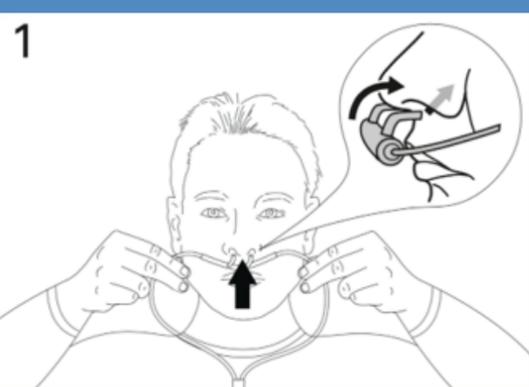



- 1. Inserte las puntas en las narinas. Asegúrese de que el lado curvo quede apuntando hacia la parte posterior de la nariz.
- 2. Pase el tubo de plástico por detrás de las orejas.
- 3. Empuje la pieza deslizante hacia arriba, hacia el mentón, hasta que el tubo de plástico esté firme y cómodo.




COLOCACIÓN DE POLIGRAFO

Sensor digital reutilizable del oxímetro


- Para colocar el sensor digital reutilizable, deslícelo por el dedo índice de la mano izquierda, como se muestra en la figura.
- La pinza digital del oxímetro debe quedar colocada en el mismo lado del cuerpo que el sensor digital del oxímetro.

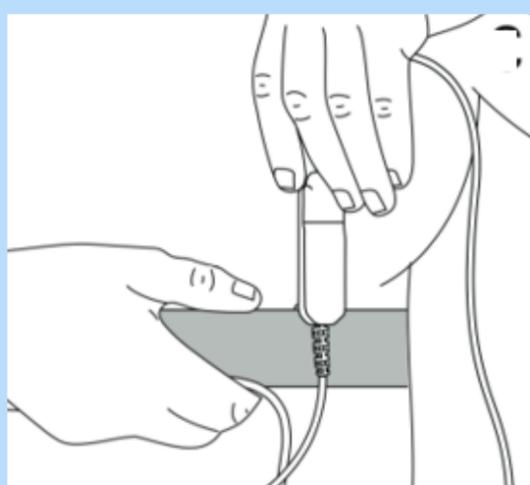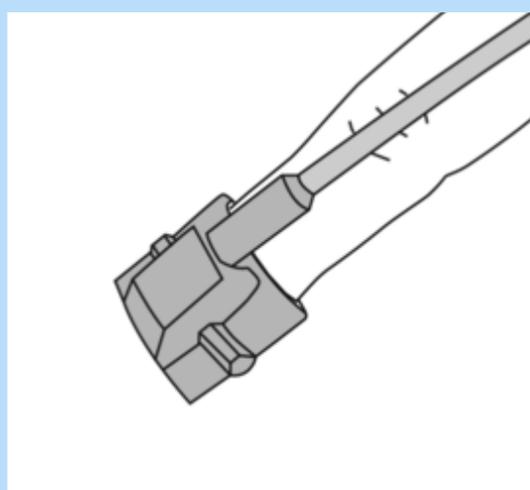

Encendido del equipo

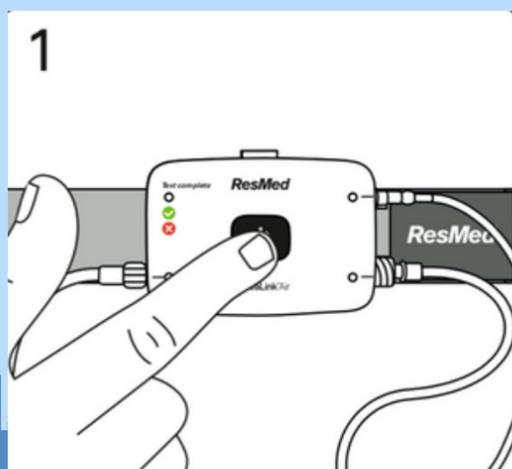

- 1. Mantenga oprimido el botón de encendido situado en el centro del dispositivo durante tres segundos o hasta que encienda la luz.

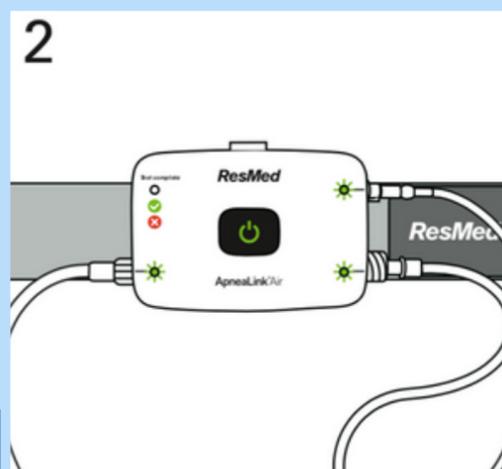

- 2. Compruebe que las luces situadas junto a los accesorios que está utilizando estén de color verde. Si alguna de esas luces está de color rojo o parpadea, el accesorio en cuestión no está bien conectado.

Nota:


Todas las luces indicadoras se atenuarán (pero permanecerán encendidas) aproximadamente 10 minutos después del inicio del registro.

COLOCACIÓN DE POLIGRAFO

Término del estudio

Una vez que ha terminado siga los siguientes pasos


- 1. Mantenga oprimido el botón de encendido durante 3 segundos para detener el estudio.

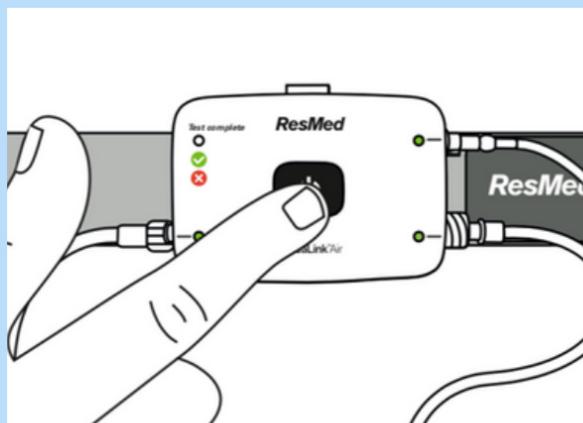

- 2. Mantenga oprimido el botón de encendido durante otros 3 segundos para apagar el dispositivo.

- 3. Una vez que ya no parpadea ninguna luz proceda al retiro del equipo.

- 4. Por último, retire la cánula desechable (gire a la izquierda el extremo del conector de la cánula nasal hasta que el conector esté suelto) y deposítela en la basura.

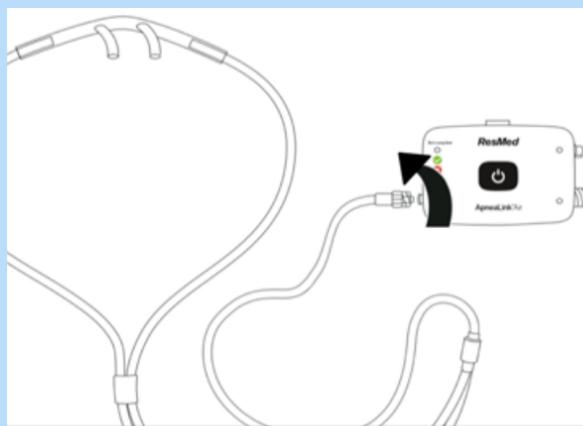

- 5. Colocar todo lo demás nuevamente en el bolso y devolverlo según se lo hayan solicitado.

Nota:

Para ver el video sobre cómo usar un Polígrafo Respiratorio puede seguir el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=ldfWsMxStfE>